



INSTRUCCIONES DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Bomba Infinity

Suministros necesarios

- Poste IV
- Abrazadera/
cargador de la bomba
- Bomba de
alimentación Infinity
- Bolsa de
alimentación Infinity
- Fórmula
- Agua

Antes de la alimentación



- Lávese las manos y luego limpie su espacio de trabajo con agua y jabón.
- Si va a usar fórmula líquida, limpie la parte superior del recipiente con una toalla de papel humedecida, antes de abrirlo.
- Si va a usar fórmula en polvo, prepárela siguiendo las instrucciones de su médico o dietista, y guarde lo que le sobre en el refrigerador.



- Verifique la colocación del tubo de alimentación siguiendo las instrucciones de su médico o equipo de atención médica. Si sospecha que se ha movido, no pase nada a través del tubo y póngase en contacto con su médico.
- Enjuague el tubo de alimentación con la cantidad de agua recomendada por su equipo de atención médica.

Preparación de la bomba

1. Fije la abrazadera al poste IV, colocándola alrededor de este. Asegúrela al poste girando la perilla negra grande (**Figura 1**).




2. Fije la abrazadera a la bomba insertando el pequeño tornillo de la abrazadera en la abertura localizada en la parte posterior de la bomba Infinity. Gire la rueda gris para apretar el tornillo. Asegúrese de no apretarla demasiado, para no dañar la bomba.
3. **Cómo cargar la bomba:** Inserte el extremo plano del cargador en el puerto designado del lado izquierdo de la bomba. Empuje el cargador hasta el fondo de la bomba hasta que oiga un chasquido. Enchufe el cargador en un tomacorriente de pared. Se encenderá una luz verde en el cargador para indicar que la corriente eléctrica está fluyendo hacia la bomba. Aparecerá el símbolo de un enchufe en la pantalla, junto con cuatro barras que se desplazarán de la letra E a la F. Las barras dejarán de desplazarse cuando la bomba termine de cargarse. Nota: Siempre repase las pautas del fabricante respecto a su bomba.
4. Abra la parte superior de la bolsa de alimentación y vierta la cantidad prescrita de fórmula en la bolsa. Cierre la parte superior del conjunto de la bolsa, refrigere la fórmula que no utilice y luego cuelgue la bolsa de alimentación en el poste IV.

Operaciones de la bomba

1. Abra la tapa gris localizada al frente de la bomba, presionando firmemente el pasador pequeño ubicado en la parte inferior de la tapa y tire hacia arriba. Aquí es donde se cargará el tubo. Tenga cuidado de abrir la tapa solamente de esta manera, ya que la bomba no funcionará si rompe la tapa. Cargue la bolsa de alimentación en la bomba haciendo un bucle con la parte coloreada del tubo alrededor de la rueda negra de la bomba (**Figura 2**). Se requiere algo de estiramiento, pero NO estire demasiado el tubo. Coloque la parte plástica transparente del tubo ajustadamente en la bomba y cierre la tapa gris.



2. Encienda la bomba. Localice el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) del lado derecho de la pantalla. Presiónelo y manténgalo oprimido por 1 o 2 segundos para encenderla.
3. Deberá cebar el tubo de la bomba para eliminar el aire del tubo. Para iniciar el cebado, coloque la punta de la bolsa de alimentación sobre un lavabo/fregadero o contenedor de residuos. Quite el protector de la punta y póngalo a un lado. Gire el conjunto de la bolsa boca abajo y localice

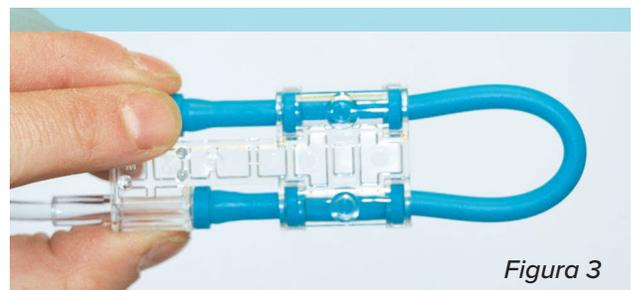

el casete de plástico duro con el bucle de color verde azulado. Apriete suavemente la bolsa de alimentación mientras pellizca directamente debajo del símbolo de lágrima en la parte coloreada del tubo (**Figura 3**). Esto desplazará la fórmula a través del tubo. Si sostiene la bolsa de alimentación en esta posición mientras presiona suavemente la “lágrima”, empujará o eliminará el aire del tubo. Continúe haciendo esto hasta que vea que salen algunas gotas del extremo del tubo.

- Si se le dificulta esta técnica, puede usar la bomba para cebar el tubo y eliminar el aire. Presione y mantenga oprimido el botón de cebado de la bomba y esto hará que la fórmula fluya y expulse el aire. Tendrá que seguir presionando el botón de cebado hasta que la fórmula llegue al extremo del tubo. Asegúrese de seguir sosteniendo la bomba sobre el lavabo/fregadero o contenedor de residuos hasta eliminar todo el aire. No permita que entre aire en el tubo de alimentación.

Hablemos del tiempo de colgado

El tiempo de colgado de la fórmula se refiere a la cantidad de tiempo que la fórmula se puede almacenar en una bolsa de alimentación de bomba de manera segura; en otras palabras, cuánto tiempo se puede “colgar” en el poste IV durante las alimentaciones con la bomba. La cantidad de tiempo de colgado dependerá del tipo de fórmula.



- Leche materna: 4 hrs.
- Fórmula en polvo mezclada con agua: 4 hrs.
- Fórmula líquida fuera del recipiente: 12 hrs.
 - Si agrega más agua o líquido a una fórmula líquida reducirá el tiempo de colgado a 4 hrs.

Ajuste de la velocidad/dosis

1. La palabra “Rate” (Velocidad) aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ajuste la velocidad de alimentación prescrita pulsando los botones de MÁS (+) o MENOS (-) situados del lado derecho de la bomba, hasta que haya ingresado la velocidad de alimentación prescrita (**Figura 4**).
2. Dosis significa establecer un volumen específico que la bomba infundirá en cada alimentación. Para ingresar una dosis, solo tiene que pulsar el botón RATE/DOSE (Velocidad/Dosis) hasta que aparezca la palabra “DOSE” (Dosis) en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
 - **Para alimentaciones continuas**, presione y mantenga oprimido el botón MÁS (+), hasta que aparezca “INF” en la pantalla, que es la abreviatura de “Infinity.” Esto significa que la bomba seguirá funcionando, siempre y cuando haya fórmula en la bolsa.
 - **Para alimentaciones de bolos o intermitentes**, utilice los botones MÁS (+) y MENOS (-) para ajustar la dosis prescrita.



Figura 4



Cómo iniciar la bomba de alimentación

- Después de haber enjuagado el tubo con agua, estará listo para introducir el extremo de la punta de la bolsa de alimentación en el tubo de alimentación, asegurándose de que quede fijo. Cuando esté listo para empezar la alimentación, presione el botón RUN/PAUSE (Marcha/Pausa) localizado del lado derecho de la pantalla. Aparecerá la palabra “Run” (Marcha) en la pantalla para indicar que la bomba está funcionando.

Comentario sobre la seguridad: Nunca permita que fórmula se seque en el interior de la bolsa de alimentación y el tubo, ya que esto puede provocar obstrucciones. Asegúrese de usar una nueva bolsa de alimentación cada 24 horas.

- **La mayoría de los seguros cubren una bolsa de alimentación diaria.**

Después de la alimentación

1. Apague la bomba de alimentación presionando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) y manténgalo oprimido durante 1 o 2 segundos; luego, desconecte la bolsa de alimentación del tubo.
2. Con una jeringa con agua, enjuague el tubo.
3. Si va a proporcionar otra alimentación con la misma bolsa de alimentación, agregue agua tibia a la bolsa, agítela unas cuantas veces y vacíela en el fregadero de la cocina. Después de agregar más agua a la bolsa, sostenga la punta de la bolsa de alimentación sobre el fregadero y emplee la técnica de lágrima para enjuagar manualmente la bolsa y el tubo con el agua hasta que esta salga transparente.
4. Una vez que el agua haya expulsado la fórmula restante, cubra la punta de la bolsa de alimentación con el protector y deje que la bolsa se seque al aire.

Si tiene alguna pregunta,
llámenos al **866-883-1188**
aveannamedicalsolutions.com

**Aveanna Healthcare
Medical Solutions**

Fax: 844-754-1345